


## フレクション-A

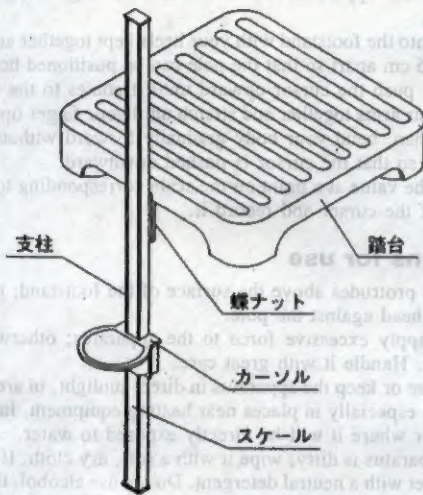

■仕 様

測定範囲	-20~35cm
最小単位	0.5cm
寸 法	約(W)282×(D)378×(H)607mm
重 量	約1.2kg

## ■測定方法

- 1) 踏台と支柱を螺ナットで固定します。
- 2) 安定している高さ35cm以上の台に本器を据えます。
- 3) かかとを付け支柱をはさむように足先を約5cm開いて踏台の上に立ちます。
- 4) カーソルを静かに一番上まで上げます。
- 5) 両手をそろえて指先を伸ばしカーソルに当てながら、ひざを曲げないように徐々に前屈します。
- 6) カーソルの上端で、スケールに示された値を読み取り記録します。

## ■注意事項

- ・支柱は踏台よりも上に突き出ているので、頭をぶつけないようにしてください。
- ・無理な力を加えると破損する恐れがありますので、大切に取扱ってください。
- ・直射日光が当たる場所や暖房器具の近くなど温度が非常に高い所、ほこりや湿気の多い所、また水がかかる所でのご使用や保管は避けてください。
- ・本器が汚れた時は柔らかい布でからぶきしてください。汚れがひどい時は中性洗剤を含んだ布で拭いてください。シンナー、アルコール等は表面を傷めますので使わないでください。

立位体前屈の年齢別平均値 (cm)

年齢	男子	女子	年齢	男子	女子	年齢	男子	女子
10	7.0	10.3	30	11.0	14.3	50	6.6	13.1
11	7.7	11.1	31	10.8	14.2	51	6.4	13.0
12	8.4	11.9	32	10.6	14.2	52	6.2	13.0
13	9.2	12.7	33	10.3	14.1	53	5.9	12.9
14	10.0	13.5	34	10.1	14.1	54	5.7	12.9
15	10.9	14.0	35	9.9	14.0	55	5.5	12.8
16	11.7	14.4	36	9.7	13.9	56	5.3	12.7
17	12.5	14.8	37	9.5	13.9	57	5.1	12.7
18	12.8	15.1	38	9.2	13.8	58	4.8	12.6
19	13.0	15.4	39	9.0	13.8	59	4.6	12.6
20	13.1	15.5	40	8.8	13.7	60	4.4	12.5
21	13.1	15.4	41	8.6	13.6	61	4.2	12.3
22	12.9	15.2	42	8.4	13.6	62	4.0	12.1
23	12.7	14.9	43	8.1	13.5	63	3.7	11.9
24	12.4	14.7	44	7.9	13.5	64	3.5	11.7
25	12.1	14.5	45	7.7	13.4	65	3.3	11.5
26	11.9	14.5	46	7.5	13.3	66	3.2	11.3
27	11.7	14.5	47	7.3	13.3	67	3.1	11.1
28	11.4	14.4	48	7.0	13.2	68	2.9	10.9
29	11.2	14.4	49	6.8	13.2	69	2.8	10.7
						70	2.7	10.5

資料：新・日本人の体力標準値 2000  
東京都立大学体力標準値研究会

Average values of standing trunk flexion by age (cm)

Age	Male	Female	Age	Male	Female	Age	Male	Female
10	7.0	10.3	30	11.0	14.3	50	6.6	13.1
11	7.7	11.1	31	10.8	14.2	51	6.4	13.0
12	8.4	11.9	32	10.6	14.2	52	6.2	13.0
13	9.2	12.7	33	10.3	14.1	53	5.9	12.9
14	10.0	13.5	34	10.1	14.1	54	5.7	12.9
15	10.9	14.0	35	9.9	14.0	55	5.5	12.8
16	11.7	14.4	36	9.7	13.9	56	5.3	12.7
17	12.5	14.8	37	9.5	13.9	57	5.1	12.7
18	12.8	15.1	38	9.2	13.8	58	4.8	12.6
19	13.0	15.4	39	9.0	13.8	59	4.6	12.6
20	13.1	15.5	40	8.8	13.7	60	4.4	12.5
21	13.1	15.4	41	8.6	13.6	61	4.2	12.3
22	12.9	15.2	42	8.4	13.6	62	4.0	12.1
23	12.7	14.9	43	8.1	13.5	63	3.7	11.9
24	12.4	14.7	44	7.9	13.5	64	3.5	11.7
25	12.1	14.5	45	7.7	13.4	65	3.3	11.5
26	11.9	14.5	46	7.5	13.3	66	3.2	11.3
27	11.7	14.5	47	7.3	13.3	67	3.1	11.1
28	11.4	14.4	48	7.0	13.2	68	2.9	10.9
29	11.2	14.4	49	6.8	13.2	69	2.8	10.7
						70	2.7	10.5

仙台支店 〒984-0051 仙台市若林区新寺1-7-21 (新寺KSビル7F) TEL. 022 (291) 2765  
 東京支店 〒142-0064 東京都品川区旗の台1-6-18 TEL. 03 (3786) 4111  
 名古屋支店 〒460-0008 名古屋市中区栄5-26-39 (タカシマ名古屋ビル4F) TEL. 052 (264) 9201  
 大阪支店 〒532-0011 大阪市淀川区西中島6-7-8 (大昭ビル7F) TEL. 06 (6304) 6015  
 広島支店 〒730-0053 広島市中区東千田町1-1-68 (中国ビル3F) TEL. 082 (246) 8851  
 福岡支店 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東1-1-33 (はかた近代ビル7F) TEL. 092 (411) 1430  
 本社営業部 〒956-0113 新潟市矢代田619 TEL. 0250 (38) 3243  
 本社 〒956-0113 新潟市矢代田619 TEL. 0250 (38) 4131